



# Spooky<sup>2</sup> Scalar

INSTRUCTION

July 2018  
Spooky2 Team

### **Our Mission:**

We will eliminate all illness.

### **Our Vision:**

We aim to empower people to take control of their own health and live long, healthy, fulfilling lives with happiness and joy.

### **Our Value:**

We value love, compassion and honesty over profit.

Breve Panoramica

1

Contenuto del pacco

2

Panoramica dettagliata

3

Impostazioni dello Spooky2 Scalar

4

Sintonizzazione

5

Come applicare l'Energia Scalare

7

Note Importanti

10

Caratteristiche

10

Note Legali & Disclaimer

11

## Breve Panoramica

La chiave per la guarigione è l'informazione. L'informazione scalare. Le nostre cellule comunicano usando i campi scalari. Quando questa comunicazione è bloccata, la nostra salute ne risente. Spooky Scalar può ripristinare i meccanismi di guarigione naturali del nostro corpo.

Spooky Scalar è il primo dispositivo di trattamento scalare a fornire tre diversi metodi di trasmissione delle onde scalari di cura. Puoi scegliere quale di questi si adatta meglio alle tue esigenze. Puoi leggere di più nella sezione "Come applicare energia scalare".

Spooky Scalar è composto da due custodie nere. Il primo è un trasmettitore e l'altro è un ricevitore. Il trasmettitore viene acceso e sintonizzato. Chiunque si pone tra i coperchi dei due apparati, riceve onde scalari rivitalizzanti. I trattamenti scalari possono essere di questa semplicità.



# Contenuto del pacco



Transmitter Box x 1



Receiver Box x 1



Coil Tester x 1



Link Cable x 1



Power Cable x 1

# Panoramica dettagliata

## Pannello del Trasmettitore



## Pannello del Ricevitore



## Impostazioni dello Spooky2 Scalar

Iniziare i trattamenti scalari è un gioco da ragazzi. Ci sono 4 semplici passaggi:

1. Posizionare il trasmettitore e il ricevitore su entrambi i lati di una sedia o di un letto.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione a 12 V alla porta di alimentazione del trasmettitore.
3. Inserire il cavo di collegamento nei connettori del trasmettitore e del ricevitore.
4. Accendere e sintonizzare il trasmettitore.




## Sintonizzazione

Proprio come una radio, Spooky scalare richiede una sintonizzazione. È molto semplice da fare. Ci sono tre diversi metodi. Puoi scegliere quale trovi più facile. I primi due metodi sono i più precisi.

**1.** Posizionare il Coil Tester sul riquadro "Coil Tester Position" del trasmettitore. Ruotare la manopola di regolazione della sintonizzazione in senso antiorario fino a quando le luci del Coil Tester iniziano ad accendersi. Quindi ruotare la manopola di 2 posizioni in senso orario in modo che le luci siano spente. **Rimuovere il Coil Tester dopo la messa a punto.**



**2.** Premere l'interruttore della luce di sintonizzazione sul ricevitore. Ruotare la manopola di regolazione della sintonizzazione in senso antiorario finché la luce sul ricevitore raggiunge la massima luminosità. **Quindi premere nuovamente l'interruttore della luce di sintonia per spegnerla.**

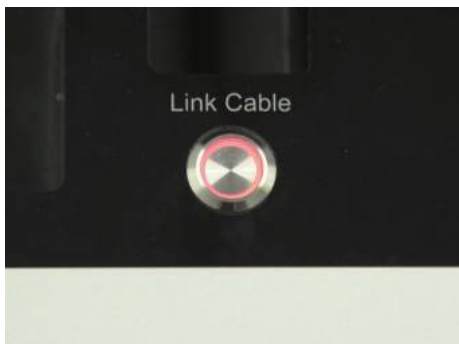

**3.** Posizionare il Coil Tester al centro della bobina di uscita. Ruotare la manopola di regolazione della sintonizzazione in senso antiorario fino a quando le luci del Coil Tester raggiungono la massima luminosità. **Rimuovere il Coil Tester dopo la messa a punto.**



### **Nota Importante**

La frequenza sintonizzata è in genere compresa tra 5.5MHz e 7MHz.

# Come applicare l'Energia Scalare

**Spooky2 Scalar può applicare l'energia Scalare in tre modi diversi: Scalare puro, Scalare molecolare e Scalare Rife.**

## Scalare Puro

Questo è il modo più semplice per applicare il metodo di cura dell'energia scalare, perché non è necessario fare nulla di speciale. Basta sintonizzare lo Spooky2 Scalar, quindi sedersi o sdraiarsi tra il Trasmettitore e il Ricevitore. L'energia scalare pura fluisce quindi tra il Trasmettitore e il Ricevitore.

## Scalare Molecolare

Posando una sostanza sulla bobina di ingresso si può migliorare ulteriormente il segnale scalare. Le molecole all'interno del campione modificheranno il segnale tra i coperchi e così si ottiene l'effetto curativo della sostanza chimica. Le sostanze possono essere oli essenziali o farmaci. Ad esempio, è possibile posizionare olio di menta piperita sulla bobina di ingresso e si riceveranno i benefici che l'olio di menta piperita fornisce.



Studi scientifici hanno dimostrato che l'informazione da sola, può provocare la distruzione di agenti patogeni. Cellule tumorali avvelenate poste sulla bobina di ingresso inducono la morte delle cellule tumorali all'interno del corpo. Le informazioni sulle cellule morenti vengono trasmesse alle cellule tumorali interne e anche loro moriranno.

## Rife Scalare

Il terzo modo per utilizzare le onde scalari è attraverso l'uso di una Modulazione Rife. Questa modalità combina le scoperte di Royal Rife con quelle di Nikola Tesla. Royal Rife ha scoperto che gli agenti patogeni rispondono a una particolare frequenza. Spooky Scalar può applicare questa frequenza usando le onde scalari di cura. Solo Spooky Scalar può modulare le frequenze originali di Royal Rife, trasformando Spooky Scalar nella macchina Rife più avanzata del mondo.

Dopo aver sintonizzato lo Spooky Scalar, si collega un generatore Spooky2 alla connessione dedicata sull'apparato trasmittente. Mentre i programmi sono in esecuzione, ci si siede tra il trasmettitore e il ricevitore. Spooky Scalar accetta qualsiasi frequenza dal grande database Spooky.



È possibile mettere un bicchiere d'acqua sulla bobina di uscita durante i trattamenti scalari, molecolari o di Rife. Questo è il processo chiamato imprinting di frequenze. Dopo aver terminato il trattamento scalare, puoi bere quest'acqua durante il giorno per migliorare gli effetti del trattamento.



I due metodi di modulazione possono essere utilizzati contemporaneamente per migliorare ulteriormente l'efficacia dei trattamenti. Ad esempio, per curare il cancro, è possibile inserire incenso, menta piperita, lavanda, enotera e oli essenziali di agrumi sulla bobina di ingresso ed eseguire programmi anti-cancro sul generatore Spooky2 collegato.

Per esempio, le persone con il cancro potrebbero mettere un farmaco chemioterapico sulla bobina di ingresso per indurre la morte del cancro nel loro corpo. Aggiungendo una tossina letale per il cancro a un campione di urina o sangue e posizionando il contenitore sulla bobina di ingresso, si miglioreranno ulteriormente i risultati, poiché le informazioni della morte delle cellule tumorali saranno trasferite alle cellule tumorali nel corpo. Anche loro moriranno.

## Note Importanti

1. Sintonizzare gli apparati prima di ogni trattamento. Il punto di sintonia può variare ogni giorno in base alla temperatura e all'umidità, nonché al layout della macchina.
2. Il trasmettitore e il ricevitore devono avere i loro coperchi uno di fronte all'altro.
3. Tenere il cavo di collegamento tra il trasmettitore e il ricevitore lontano da metallo.
4. Le persone che sono incinte o che hanno un pacemaker non dovrebbero usare Spooky Scalar.
5. I trattamenti durante la notte sono perfettamente sicuri. Non si ha "Fatica da frequenze" dalla sovraesposizione ai campi scalari. Il tuo corpo prende ciò di cui ha bisogno e tralascia il resto.
6. È meglio non condividere il campo scalare con chiunque soffra di una grave malattia.

## Caratteristiche tecniche

Dimensioni del Trasmettitore: 170mm (H) x 360 (W) x 290 (D)

Dimensioni del Ricevitore: 170mm (H) x 360 (W) x 290 (D)

Peso: 11 kg

Alimentatore: 12 VDC 2A

Massima corrente di ingresso: 0.6A

Range di frequenze: 1.00 MHz – 8.00 MHz

Dimensione del passo di frequenza: 50 kHz

Flusso scalare: 30mA

Spooky2 Scalar è concepito per l'utilizzo solo come dispositivo elettronico sperimentale. Non è da intendere come mezzo per la diagnosi, la prevenzione, la cura, il trattamento o l'attenuazione di alcuna malattia per gli esseri umani.

Le persone e/o le entità coinvolte nello sviluppo, nella produzione e/o nella commercializzazione di apparecchiature Spooky / Spooky2 (di seguito "noi") non fanno alcuna rivendicazione medica per il sistema di generazione di frequenze Spooky2 Scalar e / o Spooky2. Se hai un problema con la tua salute, consulta un professionista sanitario autorizzato.

Si prega di notare che non siamo responsabili di alcun uso, abuso o uso improprio, intenzionale o non intenzionale, del sistema di generazione di frequenze Spooky2 Scalar e/o Spooky2 o di sua qualsiasi componente per circostanze al di fuori del nostro ragionevole controllo. In ogni caso, non avremo altre responsabilità.

Usando il sistema di generazione di frequenze Spooky2 Scalar e/o Spooky2, tu, utente, capisci e accetti che non puoi avere alcuna aspettativa di curare alcun disturbo.

Comprendi anche che possibili effetti fisici e/o mentali negativi, a noi sconosciuti, potrebbero derivare dall'uso del sistema di generazione di frequenze Spooky2 Scalar e/o Spooky2. Inoltre, intendi intraprendere solo esperimenti responsabili e accetti volontariamente tutte le responsabilità per l'uso e l'applicazione di Spooky2 Scalar.

Inoltre, l'utente accetta di non ritenerci responsabili per eventuali conseguenze, dannose o di altro tipo, che potrebbero verificarsi a seguito dell'utilizzo del sistema di generazione di frequenze Spooky2 Scalar e / o Spooky2.



**Spooky<sup>2</sup>**

[www.spooky2scalar.com](http://www.spooky2scalar.com)